

“雅博”減壓氣墊床(未滅菌)

# 多美適 悠悅 Plus

Wellell雅博，全球品牌氣墊床照顧世界70多國的使用者  
長期照護氣墊床首選，30年來值得信賴的上市公司品牌



- 產品責任險100萬美金
- 符合台灣醫療器材品質管理系統
- 符合ISO 13485醫療器材品質管理系統


**Wellell** 雅博

# 多美適 悠悅 Plus FDA CE



符合長照輔具補助  氣墊床A款  氣墊床B款

符合身障輔具補助 預防壓瘡輔具  氣墊床-基礎型

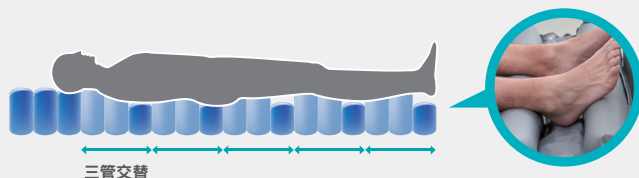

## 悠悅Plus特色: 新增腳跟管洩氣功能!

悠悅Plus新增後三管腳跟管洩氣功能,可單獨將每個單管的快速接頭打開,使腳跟管進行獨立洩氣達到減壓效果,有效預防並降低腳跟部之壓傷發生。



## 安全設計 安心使用

- **旋鈕設計** 主機採用旋鈕式設計,操作簡單。
- **阻燃材質** 主機外殼採用ABS阻燃材質。
- **輕鬆組裝** 專用快速接頭組裝,扣上接頭保護蓋確保充氣狀態。
- **警示燈號** 主機面板會於床墊壓力異常時發出警示燈號,預防意外產生。

## 科學標準 品質控管

- **三管交替循環** 床墊單管採四吋圓形管設計,每8分鐘交替循環。
- **CPR快速洩氣閥** 床墊配置CPR,因應急救時,能快速排出床墊內空氣。
- **微量出氣孔** 床墊在身體軀幹有微量出氣孔,帶動床體內部氣流,減少溼氣與熱氣。

## 舒適使用 容易清潔

- **氣墊床專用覆套** 通過多項測試:
  - TB-117-2013經耐燃性測試。
  - ISO 10993-5經細胞毒性測試標準。
- **拉鍊式設計** 方便拆裝清潔。
- **雙層PU彈性布** 提升使用舒適性。
- 可水洗,使用更安心。
- 能以75度酒精或濃度低於10000ppm次氯酸鈉擦拭消毒。

## 規格

型號	多美適 悠悅 Plus	
主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.16A
	循環時間	每 8 分鐘交替循環, 三管交替
床墊	材質	PU 雙層彈性布
		床管 Nylon 貼合 PU
		底座 Nylon 貼合 PVC
規格		4 吋 18 管, 前三管不交替, 4-11 管出氣孔 配有 C.P.R. 快速洩氣閥
尺寸		長 190 x 寬 85 x 高 10.2 公分
最大載重		140 公斤

內容僅供參考, 本公司保有規格及設計變更權力。所有功能和產品規格如有更改, 恕不另行通知。北衛器廣字第11308035號/衛署醫器陸輸壹字第000338號



### 醫療器材製造商

雅博股份有限公司

### 醫療器材販售商

雅適股份有限公司

236044 新北市土城區民生街9號1樓

T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@wellell.com

tw.wellell.com

Distributed by