

減壓氣墊

# ROHO 羅荷浮動坐墊



ROHO空浮技術由ROHO公司為了在乾燥的環境模仿水的浮力與均壓，於1973年發明。



- ☑ 符合長照輔具輪椅座墊B款 \$10,000  
(連通管型氣囊氣墊座-橡膠材質)
- ☑ 符合身障連通管氣囊輪椅座墊 \$11000  
橡膠材質分區型

permobil



Wellell 雅博

# ROHO 羅荷浮動坐墊



全球氣囊坐墊專業品牌，空浮技術領導品牌

ROHO空浮技術由ROHO公司為了在乾燥的環境模仿水的浮力與均壓，於1973年發明。

## ROHO羅荷空浮技術的特性

### 可移動的氣囊


羅荷坐墊的每個氣囊都能獨立移動，允許坐墊隨著使用者移動，藉由氣囊的扭轉、彎曲、翻轉以及上下移動，輕易因應使用者身形，降低摩擦剪力發生。



高度:5.5/8.5/10.5公分


### 持續的回復力

因羅荷坐墊內流通的空氣，讓使用者下壓及回彈的力量，持續提供支撐力並保持平衡。

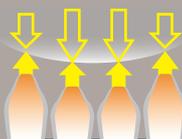


### 低表面張力

氣囊材質柔軟，使身體舒適地沉入坐墊，包覆性佳。

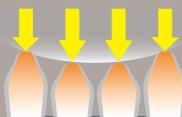


### ISOFLO記憶控制\*

能將整個坐墊內相通的空氣流體，調整鎖定至適合使用者身型，提升穩定度。  
附贈可雙向延展的坐墊外套\*  
QS-CS系列規格

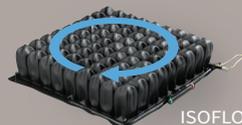

ISOFLO開啟  
坐墊內空氣相通

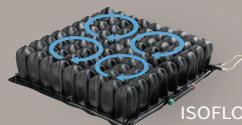

ISOFLO關閉  
可將空氣分佈鎖定

## 羅荷Hybrid Elite SR系列



ROHO® Hybrid Elite SR  
複合式泡棉氣囊坐墊  
(16x16)(18x16)

是一種可調節、充氣的輪椅支撐表面，結合了ROHO DRY FLOATATION®蜂窩狀設計坐墊和波浪泡沫底座，旨在符合個人的坐姿。骨盆負荷區域提供皮膚/軟組織保護

## 羅荷QS、CS系列、便盆椅、馬桶坐墊



四邊可調型 QS 系列  
利用ISOFLO記憶控制  
調整擺位，穩定坐姿。  
(尺寸:5.5cm、8.5cm、10.5cm)



“可調體適型”CS 系列  
利用不同高度的氣囊  
，強化坐時的穩定性。



沐浴椅坐墊  
馬桶坐墊

能簡單安裝使用，清潔容易，無重量限制，預防褥瘡更全面。



長遠來看，輪椅族應聰明地選擇羅荷坐墊，善用羅荷坐墊的空浮技術(DRY FLOTATION)\*，配合使用者的身形與坐姿，進而保護皮膚、保護坐在輪椅上的使用者，並提供支撐力協助改善坐姿不正、傾斜、坐姿下滑移位等狀況，調整過程中無需上下輪椅，實用便利。

臀部長期承受壓力，不只對病患皮膚容易造成潰瘍傷害，也困擾著家屬與護理人員

衛署醫器輸壹字第005840號 | 北衛器廣字第10804046號

### 醫療器材製造商

雅博股份有限公司

### 醫療器材販售商

雅適股份有限公司

236044 新北市土城區民生街9號1樓

T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@wellell.com

tw.wellell.com

Distributed by