

雅博減壓氣墊床獨享

一通電話，到府維修



10萬次測試，十分在乎

雅博氣墊床從研發階段起，進行各項大大小小的測試。從直接接觸人體的上蓋布料通過生物相容性(通過細胞毒性試驗)、使用環境的溫溼度、電磁波測試到運送碰撞測試。其中床管經過10萬次的充、放氣測試，只因我們在乎產品能1天24小時全天候有效運作，守護使用者，預防褥瘡的發生。

雅博，台灣品牌的氣墊床照顧世界60多國的使用者

累積了近30年的研發製造經驗，雅博除了透過臨床的驗證來證明產品是安全的，更在乎使用者的需求，舉例針對亞洲的潮濕氣候，雅博設計床墊必須要能出氣以保持乾燥。不管在材質、使用特性或生活習慣都必須依賴經年累月的經驗值，適度為產品調整。雅博的專業經驗，氣墊床的最佳表現。

Wellell

雅博集團

矩形TPU床管



多美適3Q “雅博” 減壓氣墊床(未滅菌)

防止臥床褥瘡傷口的發生，避免受到長時間壓迫。


預防褥瘡！從減少壓迫開始

三管交替

單管輪流充氣洩氣的循環，定時改變身體受壓部位，以達到交替減壓的效果

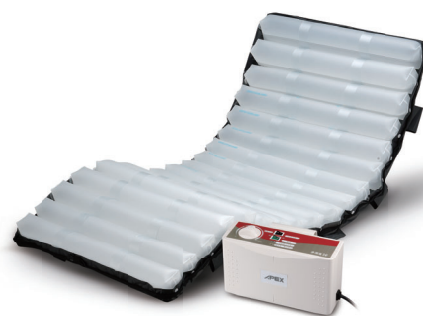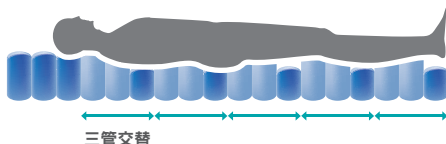

其他在病患照護上亦需注意部分

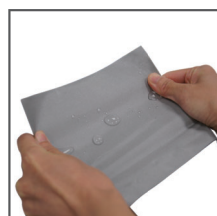

銀離子抗菌床單

特殊銀離子抗菌材質，耐水洗。布料防潑水、透氣特性，提供皮膚第一道良好接觸層



防火



透溼性



耐水性



彈性布



生物相容性
(通過細胞毒性試驗)




矩形床管

床管單管較大的接觸面積，提供穩定舒適的支撐



低壓警示

壓力過低時提醒照護者，降低患者觸底風險，安全性佳；平時照護翻身、換藥..等護理工作：可應用主機內建使用情境「靜態模式」，能暫停床管的交替

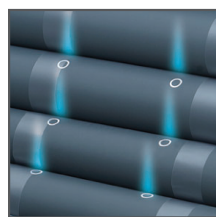

微量雷射出氣孔

床管的微量雷射出氣孔，帶動床體內部氣流，減少溼氣與熱氣累積

照護者的使用便利性也該被重視



快速接頭

簡單一個步驟輕鬆組裝，需要移動離開電源時，扣上快速接頭的蓋子可暫時保有支撐力，預防觸底



CPR快速洩氣閥

當需要進行CPR急救時，此裝置可快速排出床墊內空氣



電源線收納

將電源線固定在床邊不散落，降低意外風險

產品規格

主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘三管交替循環
	其他	低壓警示、靜態模式
床墊	材質	床單Nylon貼合PU添加銀離子抗菌材質 床管TPU；底座Nylon貼合PVC
	規格	4吋18管，前三管不交替，第4-11管出氣孔； 配有C.P.R.快速洩氣閥
	尺寸	長190 × 寬80 × 高10.2公分
	最大載重	140公斤

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更權力。所有功能和產品規格如有更改，恕不另行通知。
衛署醫器製壹字第001583號/北衛器廣字第10805054號

醫療器材製造商
雅博股份有限公司
醫療器材販售商
雅適股份有限公司
236044 新北市土城區民生街9號1樓
T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526
消費者服務專線 0800 054 133
customer@wellell.com
tw.wellell.com
Print-2023/07 版權所有，翻印必究