

# 雅博減壓氣墊床獨享

一通電話，到府維修



## 10萬次測試，十分在乎

雅博氣墊床從研發階段起，進行各項大大小小的測試。從直接接觸人體的上蓋布料通過生物相容性(通過細胞毒性試驗)、使用環境的溫溼度、電磁波測試到運送碰撞測試。其中床管經過10萬次的充、放氣測試，只因我們在乎產品能1天24小時全天候有效運作，守護使用者，預防褥瘡的發生。

### 雅博，台灣品牌的氣墊床照顧世界60多國的使用者

累積了近30年的研發製造經驗，雅博除了透過臨床的驗證來證明產品是安全的，更在乎使用者的需求，舉例針對亞洲的潮濕氣候，雅博設計床墊必須要能出氣以保持乾燥。不管在材質、使用特性或生活習慣都必須依賴經年累月的經驗值，適度為產品調整。雅博的專業經驗，氣墊床的最佳表現。

**Wellell**

雅博集團

自動調壓數位主機


# 多美適Auto “雅博” 減壓氣墊床(未滅菌)

防止臥床褥瘡傷口的發生，避免受到長時間壓迫。

## 預防褥瘡！從減少壓迫開始

### 二管交替

單管輪流充氣洩氣的循環，定時改變身體受壓部位，以達到交替減壓的效果

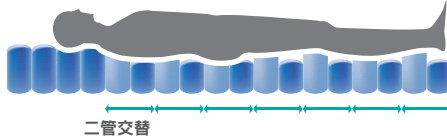

## 其他在病患照護上亦需注意部分




**銀離子抗菌床單**  
特殊銀離子抗菌材質，耐水洗。布料防潑水、透氣特性，提供皮膚第一道良好接觸層



防火 透溼性 耐水性 銀離子 生物相容性 (通過細胞毒性試驗)



**管上管設計**  
床管總高度8吋，無需額外使用底墊，停電時下層單管仍可提供基礎支撐

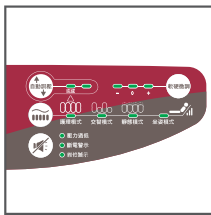

### 自動調壓數位主機

開機時不需設定，主機偵測使用者的體重自動提供最適當的壓力設定，搭配軟硬微調鍵，可進一步調整舒適度

## 照護者的使用便利性也該被重視



### 主機內建多種使用情境

**護理模式:**能暫停交替，壓力充至最大，方便執行各樣護理工作，此模亦適用病患需要下床活動時

**異常警示:**壓力過低時異常燈亮起並發出警示聲，提醒照護者，降低患者觸底風險，安全性佳

**坐姿模式:**當病床頭部位置揚起，患者呈坐姿形態時，可切換至坐姿模式，以避免臀部位置的壓力過度集中



### 電源線收納

將電源線固定在床邊不散落，降低意外風險



### CPR快速洩氣閥

當需要進行CPR急救時，此裝置可快速排出床墊內空氣

## 產品規格

主機	電源需求	AC 120V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘二管交替循環
	自動型	自動偵測使用者體重，提供適當壓力
	其他	異常警示燈+警示音、護理/交替/靜態/坐姿模式
床墊	材質	床單Nylon貼合PU添加銀離子抗菌材質 床管Nylon貼合PU；底座Nylon貼合PVC
	規格	8吋20管，前四管不交替；配有CPR快速洩氣閥
	尺寸	長200 × 寬85 × 高20.3公分
	最大載重	200公斤

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更權力。所有功能和產品規格如有更改，恕不另行通知。  
衛署醫器製壹字第001583號/北衛器廣字第10805054號

醫療器材製造商  
雅博股份有限公司  
醫療器材販售商  
雅適股份有限公司  
236044 新北市土城區民生街9號1樓  
T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526  
消費者服務專線 0800 054 133  
customer@wellect.com  
tw.wellect.com  
Print-2023/07 版權所有，翻印必究