

雅博獨家代理

ROHO "羅荷"浮動坐墊 (未滅菌)

產品規格 氣囊高度:10.5公分/8.5公分/5.5公分



衛署醫器輸字第005840號

- 可移動的氣囊：ROHO羅荷坐墊的每個氣囊都能獨立移動，允許坐墊隨著使用者移動，藉由氣囊的扭轉、彎曲、翻轉以及上下移動，輕易因應使用者身形，降低摩擦剪力發生。
- 持續的回復力：因羅荷坐墊內流通的空氣，讓使用者下壓及回彈的力量，持續提供支撐力並保持平衡。
- 低表面張力：氣囊材質柔軟，使身體舒適地沉入坐墊，包覆性佳。
- ISOFLO記憶控制：能將整個坐墊內相通的空氣流體，調整鎖定至適合使用者身型，提升穩定度。
- 附贈可雙向延展的坐墊外套。


居家復健 幫助居家使用者，進行活動以及協助生活自理，並減輕照護負擔。



"雅博"皮膚減壓墊(未滅菌)

- 減少患處承受壓力，通風性佳，有助於傷口乾癒癒合。
- 外徑15、18、20公分三種尺寸。

衛署醫器製登字第017130號

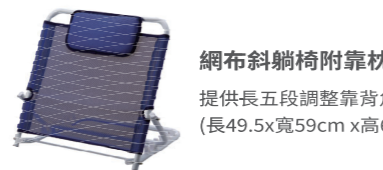

網布斜躺椅附靠枕

提供長五段調整靠背角度
(長49.5x寬59cm x高60.5)




腳踏器(可折疊)


尺寸:47x41x26cm/淨重: 2.3公斤
折疊後:27x41x17.5cm

北衛器廣字第10804046號;北衛器廣字第10805054號

ISOFLO 開啟 坐墊內空氣相通

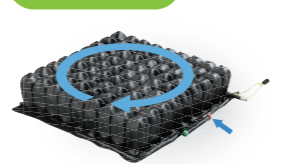

ISOFLO 關閉 可將空氣分佈鎖定

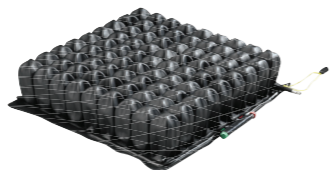


"四邊可調型"QS系列

利用ISOFLO記憶控制調整擺位，穩定坐姿。



"可調體適型"CS系列

利用不同高度的氣囊，強化坐時的穩定性。

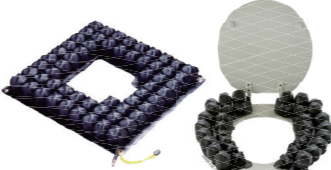

沐浴椅坐墊/馬桶坐墊

能簡單安裝使用，清潔容易，無重量限制，預防褥瘡更全面。

呼吸治療

雅博明白在居家呼吸照護上所遇到的各種情境，研發製造一系列抽痰機及噴霧器，滿足不同使用者需求。透過經驗豐富的團隊，耐用高品質的產品，以及完善的客戶服務系統，雅博期望能協助每一位照護者照顧好家人，進而預防疾病惡化，維持生活品質，提供更多貼心與關懷。

"雅博"噴霧治療器AP-100100

- 霧化粒子細微、均勻(MMAD4.3μm);能有效深達至肺部深層，被人體直接吸收
- 精巧收納、上掀式保護蓋，方便相關配件收納與防塵
- 過熱保護:溫度過高時主機將自動停止運轉
- 可連續使用30分鐘，性能穩定、可靠



衛署醫器陸輸字第001095號

"雅博"噴霧治療器9R-021000

- 霧化粒子細微、均勻(MMAD1.64±0.16 μm);能有效深達至肺部深層，被人體直接吸收
- 可配搭口含式微量噴霧藥罐組或面罩式組件使用
- 管架便利設計：病患或坐或臥均可使用



衛署醫器陸輸字第001095號

"雅博"攜帶式噴霧器 PY-001

- 細小分子的霧化顆粒<5μm,容易吸收，達到最大療效!
- 體積小、僅138公克
- 超靜音、電池式，適合外出攜帶
- 無接管設計，傳遞藥物更有效率，用藥不浪費



衛署醫器製字第004768號

山普超音波噴霧治療器

- 阿根廷原裝進口
- 利用超音波原理，使液狀藥物霧化成微小粒子，順利由呼吸器官吸入呼吸道及肺部
- 旋鈕式控制，霧量大小隨你調
- 倒數計時器，自動關機提醒治療時間
- 安靜、耗電量小，耐用口碑



山普3058
衛署醫器輸字第033305號

抽痰機的新概念，有別以往機械式的設計，家電般的外型，減輕抽痰時的心理負擔。採用無油式壓縮機，耐用持久，品質可靠；產品介面人性化設計，安裝容易，操作簡單；產品符合衛生安全與感染控制要求。

雅博倍護抽痰機VacPro / VacPlus

- 全系列產品的防水升級，延長使用年限
- 最大抽吸力可達600mmHg
- 最大抽吸量可達24LPM
- 可有效清除呼吸道分泌物，滿足醫療護理、安養中心及居家照護所需
- 配有800ml抽痰杯，易更換清洗
- 其他規格: Vac Plus 內建蓄電池，適合戶外或停電使用。



衛署醫器製字第003118號

雅博倍護抽痰機Vac Maxi

- 全系列產品的防水升級，延長使用年限
- 46LPM 快速的最大流量
- 環抱式量杯架可有效固定抽痰杯，減震效果一把罩
- 配有1800ml 抽痰杯，易更換、清洗



衛署醫器製字第003118號

福康照護抽痰機VC701

- 馬達特殊設計，結構緊湊，堅固耐用，操作便利
- 吸盤式底座，防震、低噪音；維持優質照護、生活品質。
- 過濾器，降低污染、安心、衛生
- 硬質塑料貯液瓶800c.c.，便於拆卸、清洗



衛署醫器製字第001600號

福康照護抽痰機TC2000V

- 馬達驅動：堅固耐用，低震動、低發熱
- 提供抽吸力高達650mmHg，可進行動力式抽痰，壓力穩定
- 1800c.c.透明收集瓶，易更換、清洗



衛署醫器製字第001600號

電子醫療產品

以「自我健康管理」的概念，專業研發製造，由於在病痛或意外發生時，彼此照顧的能力變的薄弱，所以平時就必須注意個人及家庭成員的健康狀況。

雅博手指型血氧濃度計SB100

- 光學手指感應器：可即時、連續的單點生理監測
- 大LED顯示：字幕清晰，易於判讀
- 輕巧外型：僅重37g(不含電池)，便於攜帶
- 耗電量省：2顆AAA電池約可連續使用14小時



衛署醫器製字第003925號

雅博血氧濃度計SA310

- 除了使用鹼性電池，亦可使用一般AC電源
- 大型背光式液晶螢幕；易於讀取
- 警示提醒:血氧值或心跳率，高/低於設定值時即會發出警示音
- 心跳警響功能:由警響頻率可知心跳率
- 自動截電:無量測進行時，約1分鐘將自動關機



衛署醫器製字第003758號

雅博耳溫槍TH889

- LCD液晶螢幕:數值、圖像、清晰易讀
- 夜光模式:內建螢幕燈，黑暗中也能清楚顯示數據
- 鋰電池:長效、低耗電量，使用壽命更長
- 智慧省電裝置，一分鐘未使用自動關機



衛署醫器製字第002143號

"雅博"電子式血壓計BPM602

- 依歐盟醫療器材指令MDD(93/42/EEC)設計，台灣製造
- 記錄顯示：開機後自動顯示最後一筆血壓量測值
- 省電裝置：2分鐘未使用自動斷電
- 收納方便：附有攜帶包，方便外出攜帶使用
- 大螢幕，大字體：顯示清楚易讀




衛署醫器製字第0044599號

"雅博"經皮神經電刺激器(無線式)

舒緩肩頸頂叩
腰部、深部肌肉的痠痛

在家享受無"線"制的
醫療等級專業治療

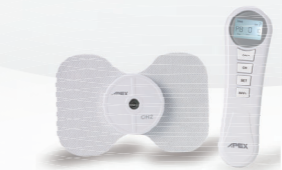

衛署醫器製字第005915號

- 無線，無繁瑣，無比驚歎，無線低周波，舒緩肩膀痠痛煩擾不再糾纏
- 簡約設計，醫療也可以很科技，前所未有地完美融合，結果令人驚歎
- 充電式：內含USB充電線、充電插頭，避免電池浪費、電池漏液問題，充電後約可使用1.5小時~2小時
- 圖像化顯示，操作容易，簡單易懂，台灣製造
- 內附主機x1、子機x2、蝴蝶型貼片x2
- 一台主機，兩人享用



衛署醫器製登字第007677號

"雅博"恆溫濕熱電毯(未滅菌)

溫暖患部，改善不適感，保暖保健，一毯搞定!

熱敷功效：透過溫熱效果達到
局部放鬆、舒緩及保暖目的。

尺寸: 14"x27"/14"x20"/肩頸20"x26"

- 自動產生水蒸氣，深入表皮，熱敷效果更加迅速，提升熱舒緩及局部放鬆功效
- 四段控溫(45°C、55°C、65°C、75°C) 控時(15、30、45、60分鐘)
- 遠紅外線生化陶瓷，遇熱釋放遠紅外線光波
- 數位恆溫，精確控溫；快速升溫，溫感明顯
- 台灣製造、日本厚生省醫材認證工廠製造
- 透氣吸濕布套，觸感輕柔舒適 • 天然風化珊瑚砂
- 止滑點設計，使用不滑動

GM350PP 雅博低周波治療器

- 不驚嚇!可微調9種組合模式及調整輸出強度緩升力道，滿足各種喜好的族群
- 美國FDA, 歐盟CE認證醫療級
- 上班電腦族的肩膀急性疼痛，即時舒緩
- 家事勞動的痠痛關節，在家就能舒緩
- 內建9種專業模式，簡單選擇阿嬤也會用
- 獨立控制不同部位的治療強度
- 一台主機，雙頻輸出



衛署醫器製字第006696號

北衛器廣字第10804035號;北衛器廣字第10911001號

長期臥床的居家護理

你需要雅博專業的輔具支援



Be well, Live well
Wellell



掃描QR Code

看氣墊床補助說明

製造廠商/販賣藥商
雅博股份有限公司
Wellell Inc.
236044 新北市土城區民生街9號
T +886 2 2268 5600
F +886 2 2268 6526
消費者服務專線 0800 054 133
customer@wellell.com

www.wellell.com
Print-2022/08-2000 版權所有，翻印必究
內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更之權利

代理商 / 經銷商

Wellell 雅博

全球品牌氣墊床照顧世界70多國的使用者

以使用者為中心，解決臨床痛點，提升臨床價值

雅博透過與臨床權威的緊密合作，反覆進行臨床驗證確保產品實際解決臨床痛點、優化使用者體驗。除了臨床效益之外，產品的材質、使用特性及使用者的生活習慣皆是我們所重視的，透過30多年的經驗累積，不斷精進產品設計，致力於提升產品所帶來的臨床價值。

10萬次測試，十分在乎

雅博在氣墊床研發歷程中，進行各項縝密的測試。從直接接觸人體的上蓋布料開始進行生物相容性測試、使用環境溫溼度、電磁波測試到運送碰撞測試。其中單管經過10萬次的充、放氣測試，只因我們在乎產品能1天24小時有效運作，預防褥瘡的發生。



傷口照護



Optima Turn

"雅博"翻身氣墊床(未滅菌)



適用側身30度臥姿翻身，床墊翻起，照護省力

- 翻身後床管取代枕頭支撐，同時交替減壓
- 可設定翻身停留時間、一般交替模式時間
- 3合1床型，交替模式-靜態模式-翻身模式

主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.36A
	循環時間	每10, 15, 20, 25分鐘二管交替循環
	翻身停留	時間10, 20, 30, 60分鐘
	其他	異常警示、靜態休息模式、翻身模式、起身加壓、護理鍵
床墊	材質	床罩: 彈性布 床管Nylon貼合PU; 底座Nylon貼合PVC
	規格	5吋20管, 前三管不交替; 第4-12管矩形管, 後5管腳跟洩氣管, 護邊10吋矩形單管; 配有C.P.R.快速洩氣閥
	尺寸	長200 × 寬85/90 × 高13(護邊25.4)公分
	最大載重	180公斤

衛署醫器製字第003379號; 北衛器廣字第11103041號

倍護3460

"雅博"減壓氣墊床(未滅菌)

符合A款補助

衛部醫器製字第001583號

主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘三管交替循環
床墊	材質	床罩 \ 床管 \ 底座: Nylon貼合PVC
	規格	4吋18管, 第4-11管出氣孔; 配有CPR快速洩氣閥
	尺寸	長190 × 寬81 × 高10公分
	最大載重	120公斤



多美適3


"雅博"減壓氣墊床(未滅菌)

符合B款補助

銀離子添加

衛部醫器製字第001583號

主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘三管交替循環
	其他	低壓警示、靜態模式
床墊	材質	床罩: Nylon貼合PU添加銀離子抗菌材質; 床管Nylon貼合PU; 底座Nylon貼合PVC
	規格	4吋18管, 前三管不交替, 第4-11管出氣孔; 配有C.P.R.快速洩氣閥
	尺寸	長190 × 寬85 × 高10.2公分
	最大載重	140公斤

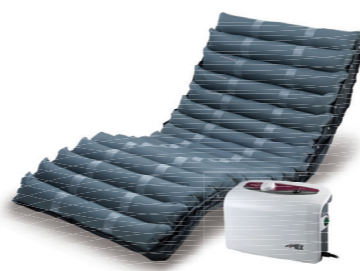

多美適3優


"雅博"減壓氣墊床(未滅菌)

符合B款補助

彈性布

衛部醫器製字第001583號

主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘三管交替循環
	其他	低壓警示、靜態模式
床墊	材質	床罩: 彈性布 床管Nylon貼合PU; 底座Nylon貼合PVC
	規格	4吋18管, 前三管不交替, 第4-11管出氣孔; 配有C.P.R.快速洩氣閥
	尺寸	長190 × 寬85 × 高10.2公分
	最大載重	140公斤

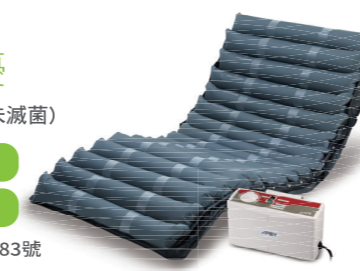

多美適2


"雅博"減壓氣墊床(未滅菌)

符合A款補助

頭枕功能

衛部醫器製字第001583號

主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘三管交替循環
床墊	材質	床罩Nylon貼合PU; 床管Nylon貼合PVC; 底座Nylon貼合PVC
	規格	4吋18管, 前三管不交替, 第4-11管出氣孔; 配有CPR快速洩氣閥
	尺寸	長190 × 寬80 × 高10.2公分
	最大載重	140公斤

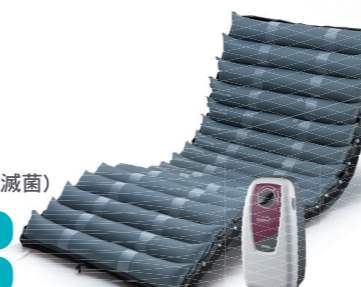

多美適3Q

"雅博"減壓氣墊床(未滅菌)

符合B款補助

銀離子添加

矩形TPU床管

衛部醫器製字第001583號

主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘三管交替循環
	其他	低壓警示、靜態模式
床墊	材質	床罩Nylon貼合PU添加銀離子抗菌材質; 床管TPU; 底座Nylon貼合PVC
	規格	4吋18管, 前三管不交替, 第4-11管出氣孔; 配有C.P.R.快速洩氣閥
	尺寸	長190 × 寬80 × 高10.2公分
	最大載重	140公斤



多美適Auto

"雅博"減壓氣墊床(未滅菌)

符合A款補助

銀離子添加

自動調壓, 數位主機

衛部醫器製字第001583號

主機	電源需求	AC 120V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘二管交替循環
	自動型	自動偵測使用者體重, 提供適當壓力
	其他	異常警示燈+警示音、護理/交替/靜態/坐姿模式
床墊	材質	床罩Nylon貼合PU添加銀離子抗菌材質 床管Nylon貼合PU; 底座Nylon貼合PVC
	規格	8吋20管, 前四管不交替; 配有CPR快速洩氣閥; 後五管腳跟洩氣管
	尺寸	長200 × 寬85 × 高20.3公分
	最大載重	200公斤



多美適3D

"雅博"減壓氣墊床(未滅菌)

符合B款補助

銀離子添加


數位主機

衛部醫器製字第001583號

主機	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.1A
	循環時間	每8分鐘三管交替循環
	其他	低壓警示、靜態模式
床墊	材質	床罩Nylon貼合PU添加銀離子抗菌材質; 床管Nylon貼合PU; 底座Nylon貼合PVC
	規格	4吋18管, 前三管不交替, 第4-11管出氣孔; 配有CPR快速洩氣閥
	尺寸	長190 × 寬85 × 高10.2公分
	最大載重	180公斤



產品特點

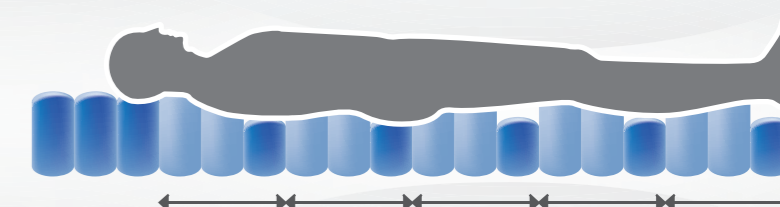

三管交替

單管輪流充氣\洩氣的循環, 定時改變身體受壓部位, 以達到交替減壓的效果




CPR快速洩氣閥
當需要進行CPR急救時, 此裝置可將床墊內空氣快速排出



銀離子抗菌床罩
特殊銀離子抗菌材質, 耐水洗。布料防潑水、透氣特性, 提供皮膚第一道良好接觸層



拉鏈式床罩
可減少床罩滑動所造成的摩擦力與剪力, 拉鏈式設計能隔絕外在污染, 常保床墊內部清潔衛生, 易於拆洗

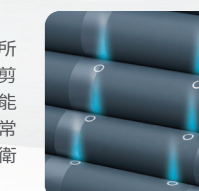

濕熱對皮膚的影響
床管的微量雷射出氣孔, 帶動床體內部氣流, 減少溼氣與熱氣累積



低壓警示
壓力過低時提醒照護者, 降低患者觸底風險, 安全性佳
平時照護翻身、換藥、等護理工作
可應用主機內建使用情境「靜態模式」, 能暫停床管的交替



雅博減壓氣墊床獨享 !!
一通電話, 到府維修~

一日宅修專線: 0800 054 133

北衛器廣字第10805054號; 北衛器廣字第10911001號